


Pomometer v1

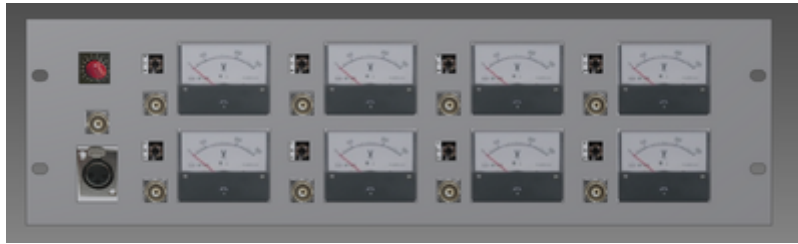

Funktion

Das Pomometer (von der Arbeitsgruppe **Polare Moleküle**) ist ein Anzeigepanel für Photodiodenspannungen. Es verfügt über acht verschiedene Kanäle die jeweils mit einem BNC-Eingang, einem Voltmeter und drei verschiedenen Vorwiderständen ausgestattet sind. Mittels eines Drehschalters lässt sich ein Signal von einem Kanal auch an einen BNC-Ausgang schalten, an dem ein Oszilloskop angeschlossen werden kann. Die jeweils drei Widerstände in jedem Kanal (1k Ω , 10k Ω und 100k Ω) dienen dazu, je nach Größenordnung der eingehenden Spannung eine passende Skalierung einzustellen.

Optionen und Alternativen

siehe [Casimeter](#)

Performance



Datum

Beginn des Projekts: February 2013

Status

27.03.2013:

Fertig und funktioniert! Aufwand für Nachbau: Es sind noch zwei bestückte Platinen sowie Rack Einschübe (Gehäuse) vorhanden. Es müssten lediglich Bohrungen in die Frontplatte des Rack Einschubs (siehe technische Zeichnungen) gebohrt werden und die einzelnen Komponenten zusammen gesteckt und verdrahtet werden.

Entwickler

K-M. Knaak/Torsten Hartmann/Timo Poll, poll@iqo.uni-hannover.de

Anwender

Die polaren Moleküle (Pomos)

Schaltungsprinzip



Schaltplan

- Der [Schaltplan](#) im PDF-Format
- Die Source des Schaltplans ist auf der [Download-Seite des Wiki](#) abgelegt.

Layout

- Abmessungen der Leiterplatte: 87mm x 85mm
- Versorgung: min. ± 15 V max. ± 35 V
- Eingang: Spannungen der Photodioden.
- Ausgang: OUT to Oscilloscope/Multimeter/etc.
- Anzeigen: Acht Voltpanelmeter
- Der Bestückungsdruck: [pomometer_layout_2013-04-05_12.pdf](#)
- Die Bestückungsliste: [pomometer_bom.pdf](#), [pomometer_bom.xls](#)
- Die [gezippten Gerberdaten](#) für die Bestellung der Platine
- Die Source des Layouts im pcb-Format liegt auf der [Download-Seite des Wiki](#).

Gehäuse

Da das Gerät in einem 19-Zoll-Rack befestigt werden soll, bietet sich ein Rackeinschub mit 3 Höheneinheiten (133,35mm) an.

[Inventordateien für das Gehäuse im zip Format](#)

Die Source der Konstruktionszeichnung liegt auf der [Download-Seite des Wiki](#).

Die [Konstruktionszeichnung des Gehäuses](#) im PDF-Format.

Test

Beim Testen fiel auf, dass die Anzeigen nur dann korrekt skalieren, wenn man schlichte Photodioden anschliet. Benutzt man Photodioden mit integrierter Verstrkungselektronik kann es zu Problemen in der Darstellung der Messung kommen.

Bedienung

Stecke ein mit 24 V DC betriebenes XLR-Kabel in die XLR-Buchse am Pomometer®.

Bilder


Kalkulation



was	wieviel	E-Preis	Preis	Anmerkung
Leiterplatte	1x	??.?? 	??.?? 	1/n von XXX EUR
Gehuse	1x	??.?? 	??.?? 	
*	?x	??.?? 	??.?? 	...
R,C	??x	0.02 	0.22 	Bauform 0805
Bestckung		??.00 		bei SRM
Verschnitt		?.?? 		
Summe		??.?? 		

Meckerliste

Was fr die nchste Version zu tun ist: (

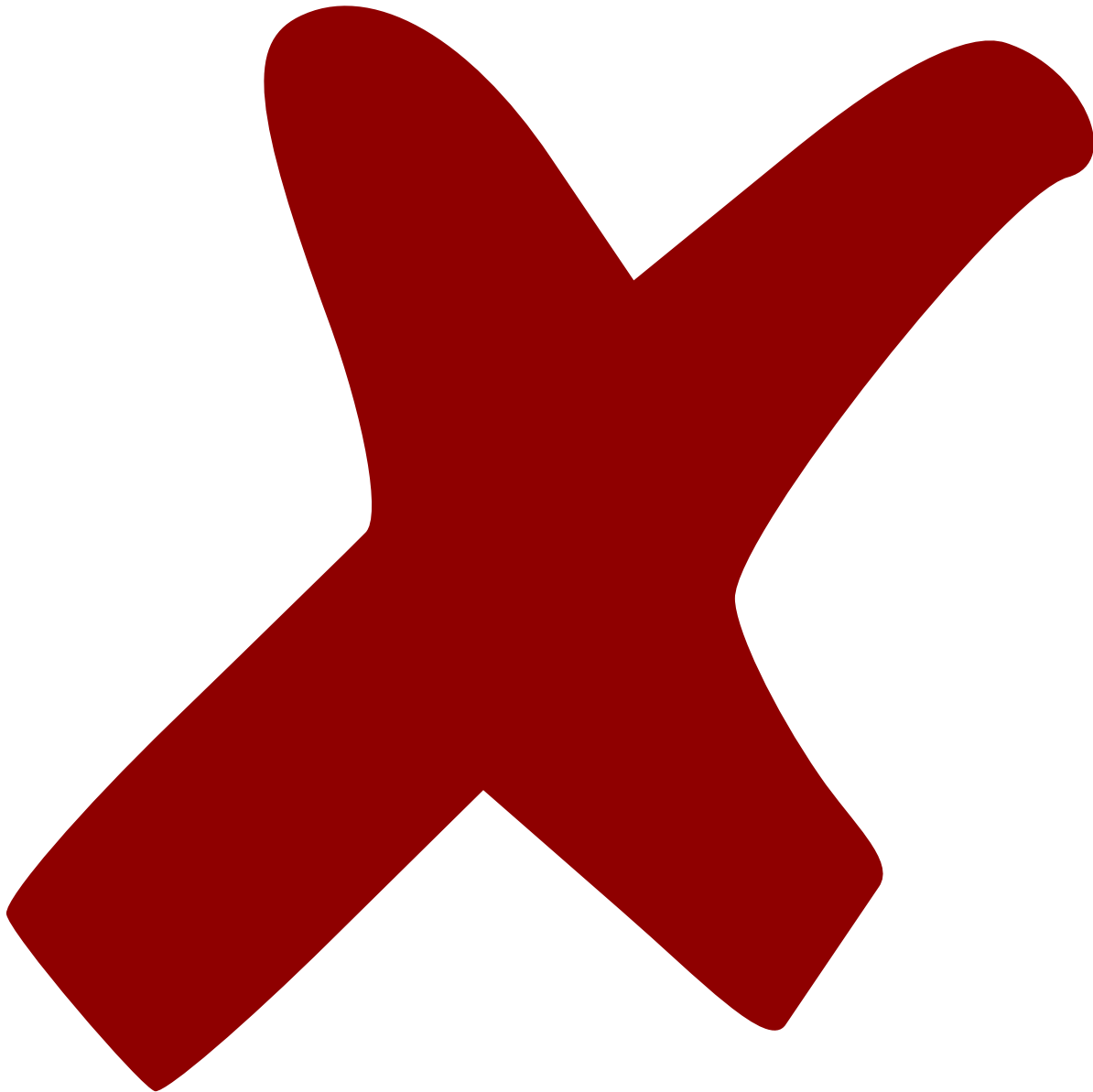

: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout,

: im



: erledigt)

Schutzdioden gegen Verpolung



Spannungsregler 7912 U3 neu positioniert um ihn legen zu können



From:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:pomometer:start&rev=1365514651>

Last update: **2013/04/09 13:37**

